

蛋白预制胶（4-20%）,10 wells,Tris-Gly,1.0mm

产品简介

本预制胶为Tris-Glycine中性缓冲体系，胶板为塑料材质，具有优良的分离效果，电泳后条带清晰锐利，预制胶凝胶稳定性好，为使用者带来更安全、更高效、更便捷的科研使用体验。

本预制胶提供不同浓度的梯度胶和固定浓度胶，梯度胶有4-20%、4-15%，固定浓度胶有8%、10%、12%、15%四种，10孔胶的最大上样量为50 μ L，15孔胶的最大上样量为30 μ L。

YuanyeGel Tris-Glycine蛋白预制胶电泳迁移图:



使用说明

1. 准备电泳缓冲液：对于变性蛋白电泳，推荐使用Gel SDS-PAGE Tris-Gly电泳液（10 $\times$ ）。
2. 将预制胶从包装袋中取出，撕掉胶板底部的胶条（如图1），缓慢地拔出梳子（如图2），将预制胶固定在电泳槽中。在电泳槽内槽倒入足够的电泳缓冲液，使内槽电泳缓冲液覆盖上样孔；外槽的电泳液加到1/3液面处即可，最高不可漫过胶板。



图1

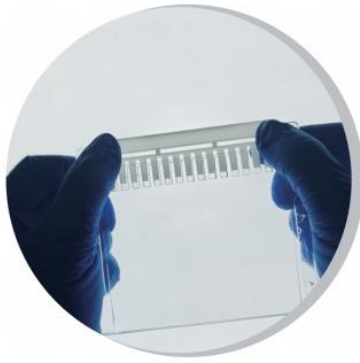


图2

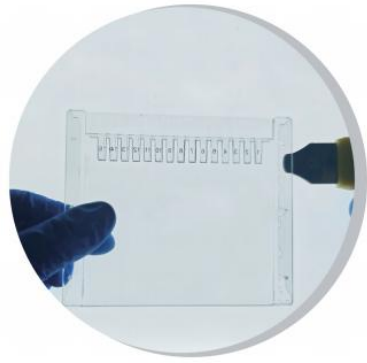


图3

3. 上样: 用常规loading buffer处理样品, 移液器吸取样品后枪头以垂直方向轻轻插入到上样孔中即可上样。注意枪头不要戳破凝胶, 也不要过度插入梳孔使胶板变形造成漏液。

4. 电泳条件: 推荐电压150V, 当溴酚蓝指示带电泳至凝胶底部, 或实验预定位置时, 即可结束电泳。

5. 电泳结束, 取出凝胶。使用撬具或其他合适的工具插入到胶板两侧之间的空隙中, 用撬具慢慢地上下撬动胶板(如图3), 重复上述操作, 撬动上、中、下三个不同的位置直至胶板两侧完全打开。

6. 胶板打开后, 凝胶可能粘在胶板的任意一侧, 取下无凝胶的一侧, 将另一侧的胶板倾斜至水中, 轻轻拨动凝胶, 使凝胶自由掉落到装有去离子水的器皿中, 晃动清洗凝胶, 然后取出进行染色或转膜。

保存条件

2-8℃保存, 自生产之日起12个月有效。

注意事项

- 1、本预制胶不能置于0℃以下冷冻, 否则凝胶会冻裂。
- 2、电泳缓冲液建议使用次数不超过3次, 如长时间不用请2-8℃保存。
- 3、使用Bio-Rad电泳槽使用时需将框架内绿色硅胶密封条取出, 然后将其平坦的一面朝外并重新装回凹槽中压紧。