

非预染蛋白 Marker (14.4-116kDa)

货号: R32690

规格: 200ul, 1ml

保存温度: -20℃保存, 有效期 12 个月。

产品简介:


本产品包含了从 14.4 kDa 到 116 kDa 共 7 种纯化的预染蛋白质(14.4, 18.4, 25, 35, 45, 66.2, 116)。主要用于在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳后大致判断目的蛋白的分子量大小。本产品未经过染色, 可以通过考马斯亮蓝染色或银染染色来观察条带位置。蛋白 Marker 已溶于上样缓冲液中, 上样前无需稀释和添加还原剂。

使用方法:

1. 将非预染蛋白 Marker 置于室温下解冻, 彻底溶解并充分混匀, 95℃加热 10 分钟以充分变性蛋白, 然后等待 marker 冷却。

2. 取本产品 5 μl 与实验样品同时进行聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE), 建议有条件的实验室在初次使用此产品时可以根据自身的实验条件和实验习惯通过预实验确定合适的上样量, 这样可以节约成本, 同时获得效果更佳的实验图片。

3. 根据上样孔的大小, 本产品通常每次上样 5-10 μl (5×1.5 mm 胶 5 μl 足够, 即可在电泳时、电泳后或转膜后观察到非常清楚的蛋白质条带)。

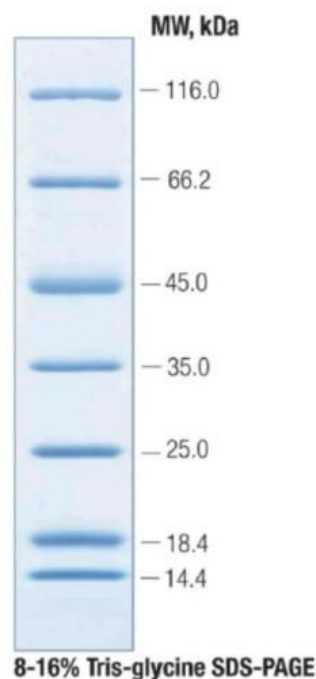

注意事项:

- 1、电泳时间不宜过长, 长时间可能导致蛋白条带出现弥散现象。
- 2、本产品不建议用于非变性电泳。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

- 3、避免反复冻融，经常使用可在充分混匀后分装保存。
- 4、如果后续染色使用银染法，建议降低上样量（1-2ul）或使用还原性上样缓冲液稀释蛋白样本（1/30-1/50）
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

