



蛋白预制胶 (8%), 12 wells, Tris-Gly, 1.0mm

说明书

产品简介:

本预制胶是 Tris-Glycine 体系, 胶板为塑料材质, 具有优良的分离效果, 电泳后条带清晰锐利, 稳定的灌注技术可以保证预制胶批次间稳定性和条带分布的一致性, 保存期限长, 为使用者带来更安全, 更高效, 更便捷的科研使用体验。

YuanYe Gel 蛋白预制胶可提供不同浓度的梯度胶和固定浓度胶, 梯度浓度胶包括 4-15%, 4-20%, 固定浓度胶有 8%, 10%, 12%, 15% 四种浓度, 每种浓度胶的梳孔数有 10 孔, 12 孔和 15 孔三种, 独特的胶孔设计可以满足客户上样量大的需求, 10 孔胶的最大上样量为 60 μ l, 12 孔胶的最大上样量为 50 μ l, 15 孔胶的最大上样量为 40 μ l。

YuanYe Gel 塑料板预制胶主要特点:

- 1、Tris-Gly 预制胶体系经典, 条带平直, 清晰锐利。
- 2、操作方便, 简单易用, 免去您配胶的烦恼, 直接安装即可使用, 打开时只需用起胶器在塑料板两侧轻轻撬开即可。
- 3、兼容性强, 兼容目前市场各种 mini 电泳槽, 以及其它胶板宽度在 10cm 的电泳槽。
- 4、塑料板预制胶节约实验成本, 物美价廉。

保存条件:

2-8 $^{\circ}$ C 保存, 12 个月有效。

YuanYe Gel 蛋白预制胶产品信息:

产品编号	预制胶浓度	孔道数	最大上样量	线性分离范围
R41667	8%	10 孔	60 μ l	25-80KDa
R41668	10%	10 孔	60 μ l	20-70KDa
R41669	12%	10 孔	60 μ l	15-60KDa
R41670	15%	10 孔	60 μ l	10-40KDa
R41671	4-15%	10 孔	60 μ l	20-200KDa
R41672	4-20%	10 孔	60 μ l	10-200KDa




上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: 3008007435@qq.com

R41673	8%	12 孔	50μl	25-80KDa
R41674	10%	12 孔	50μl	20-70KDa
R41675	12%	12 孔	50μl	15-60KDa
R41676	15%	12 孔	50μl	10-40KDa
R41677	4-15%	12 孔	50μl	20-200KDa
R41678	4-20%	12 孔	50μl	10-200KDa
R41679	8%	15 孔	40μl	25-80KDa
R41680	10%	15 孔	40μl	20-70KDa
R41681	12%	15 孔	40μl	15-60KDa
R41682	15%	15 孔	40μl	10-40KDa
R41683	4-15%	15 孔	40μl	20-200KDa
R41684	4-20%	15 孔	40μl	10-200KDa

预制胶使用简介:

- 1、准备电泳缓冲液: 对于变性蛋白电泳, 推荐使用 SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly, 10X), 源叶货号: R32485。
- 2、将 YuanYeGel 蛋白预制胶从包装袋中取出撕掉胶板底部的蓝色胶带, 缓慢地拔出梳子, 将预制胶固定在电泳槽中。(Bio-Rad 电泳槽使用时将框架内绿色硅胶密封条取出, 然后将其平坦的一面朝外并重新装回凹槽中) 电泳槽内槽加满电泳液, 外槽的电泳液加到 1/3 液面处即可, 最高不可漫过胶板。
- 3、上样: 用常规 loading buffer 处理样品, 移液器吸取样品后, 枪头以垂直方向轻轻插入到上样孔中即可上样。注意枪头不要戳破凝胶, 也不要过度插入梳孔使胶板变形造成漏液。
- 4、电泳条件: 电压 150V, 50-70min, 当溴酚蓝指示带电泳至凝胶底部, 或实验预定位置时, 即可结束电泳。如果想得到更加清晰平直的条带, 可降低电压至 100-120V, 但会延长电泳时间。
- 5、电泳结束, 取出凝胶。通过起胶器或其他合适的工具小心地插入到胶板两侧之间的空隙中, 用起胶器慢慢地上下撬动胶板, 重复上述操作, 撬动上、中、下三个不同的位置, 直至胶板两侧完全打开(见下图)。

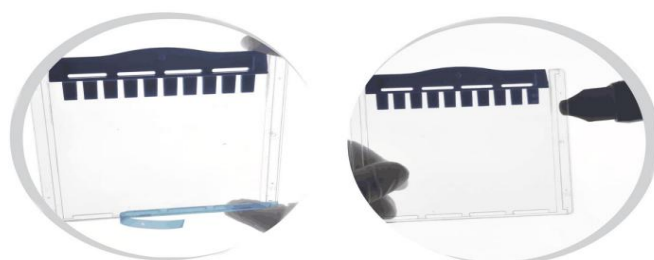



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: 3008007435@qq.com

6、胶板打开后，凝胶可能粘在胶板的任意一侧，取下无凝胶的一侧，将另一侧的胶板倾斜至水中，轻轻拨动凝胶，使凝胶自由滑落到装有水的器皿中，晃动清洗凝胶，然后取出进行染色或转膜。

注意事项：

- 1、本预制胶不能置于 0℃以下冷冻，否则凝胶会冻裂。
- 2、确保使用兼容的电泳槽，内外槽之间液体的泄露会导致蛋白迁移率低。
- 3、预制胶体系为 Tris-Glycine 体系，且 pH 值为中性，所以可能会不适用某些使用较长时间的电泳槽，如出现黄化建议更换电泳槽，或者将电泳缓冲液按照 1.5×或 2×浓度使用，即可解决。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作，使用时请注意安全。

