



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

维生素 C 检测试剂盒(菲咯啉比色法)

简介:

维生素 C(Vitamin C)又称 L-抗坏血酸,是高等灵长类动物与其他少数生物的必需营养素,在生物体内维生素 C 是一种抗氧化剂,为酸性己糖衍生物,是稀醇式己糖酸内酯,保护身体免于自由基的威胁,同时也是一种辅酶,其广泛的食物来源为各类新鲜蔬果,Vc 有 L-型和 D-型两种异构体,只有 L-型的才具有生理功能,还原型和氧化型都有生理活性。

源叶生物 维生素 C 检测试剂盒(菲咯啉比色法)检测原理是在酸性条件下,维生素 C 把三价铁离子还原成亚铁离子,后者与菲咯啉形成稳定的红色螯合物,以分光光度计 534nm 处检测吸光度,在一定浓度范围(样品浓度控制在 0.5~35 μ g/ml)吸光度与维生素 C 含量呈线性关系,获得 Vitamin C 含量,主要用于植物组织中的维生素 C(抗坏血酸)的检测,其优点是:1、反应稳定,不易褪色;2、操作简便;3、还原糖及其他常见的还原物质对实验没有干扰,因此专一性好;4、灵敏度高。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R30289 100T	Storage
试剂(A): Vitamin C 标准	25mg	4℃ 避光
试剂(B): 组织匀浆液(5×)	500ml	RT 避光
试剂(C): 酸性缓冲液	25ml	RT
试剂(D): Vitamin C Assay Buffer	25ml	RT
试剂(E): 菲咯啉显色液	50ml	4℃ 避光
使用说明书	1 份	



自备材料:

- 1、蒸馏水、无水乙醇
- 2、研钵或匀浆器、离心机、离心管或试管
- 3、比色杯、分光光度计、恒温箱或水浴锅

操作步骤(仅供参考):

1、稀释组织匀浆液: 按组织匀浆液(5×): 蒸馏水=1: 4 的比例稀释, 获得 1×组织匀浆液。

2、准备样品: 取待测材料如青菜、水果、松针等, 清洗擦干, 准确称量 2~3g, 加入研磨器内, 再加入少量 1×组织匀浆液, 研磨碎, 留取上清, 再次用 1×组织匀浆液研磨, 最后一并倒入 50ml 离心管, 补充 1×组织匀浆液至 22ml, 充分混匀, 4000g 离心 5min, 上清液即为待测液。

3、配制系列 Vitamin C 标准: 将 25mg Vitamin C 标准用 1ml 1×组织匀浆液溶解即得 Vitamin C 标准(25mg/ml), 再用 1×组织匀浆液稀释成 Vitamin C 标准(50ug/ml), 取干净离心管或试管, 按下表进行操作, 依次稀释。配置好的 Vitamin C 标准(25mg/ml)放置-20℃, 短期保存。

加入物(μl)	1	2	3	4	5	6
Vitamin C 标准(50μg/ml)	40	100	160	200	400	600
1×组织匀浆液	960	900	840	800	600	400
相当于 Vitamin C 含量(μg)	2	5	8	10	20	30

4、Vitamin C 加样: 按照下表设置空白管、标准管、测定管, 溶液应按照顺序依次加入, 并注意避免产生气泡; 如果样品中的 Vitamin C 含量过高, 可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定, 样品的检测最好能设置 2 平行管, 求平均值。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

加入物(ml)	空白管	标准管	测定管
1×组织匀浆液	1.0	—	—
系列 Vitamin C 标准(1~6 号)	—	1.0	—
待测液	—	—	1.0
无水乙醇	0.5	0.5	0.5
混匀			
酸性缓冲液	0.25	0.25	0.25
菲咯啉显色液	0.5	0.5	0.5
Vitamin C Assay Buffer	0.25	0.25	0.25

5、Vitamin C 测定：混匀， 30℃温箱中反应 60min，以空白管调零，比色杯光径 1cm，分光光度计测定 534nm 系列标准管、测定管的吸光度。

计算：

以系列标准 Vitamin C(0、2、5、8、10、20、30μg)为横坐标，以对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，求得回归方程。以测定孔吸光度代入回归方程求得维生素 C 含量。

$$\text{维生素 C 含量(mg/100g)} = (m_0 \times V_T \times 100) / (m_1 \times V_S \times 1000)$$

式中：m₀=根据待测样品的吸光度在标准曲线求得的维生素 C 的质量(μg)

V_T=待测液的总体积(ml)

m₁=样品质量(g)

V_S=测定时取样体积(ml)

100=100g

1000=μg 与 mg 的换算系数

注意事项：

- 1、上述低温试剂避免反复冻融，以免失效或效率下降。
- 2、组织匀浆液有腐蚀性，应小心操作，避免直接接触。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com


3、加样后反应不完全, 因此不能立即测定, 一般情况下 60min 内即可充分反应, 应当在 60~120min 内测定完成。

4、待测样品如不能及时测定, 应置于 2~8℃ 保存, 3 天内稳定。

5、如果样品浓度过高, 应用蒸馏水稀释后重测, 结果乘以稀释倍数。

有效期: 6 个月有效; 4℃ 运输, 4℃ 保存。

附录: 标准曲线制作: 在室温条件下按说明书操作, 用酶标仪 534nm 对系列标准((0、2、5、8、10、20、30μg)进行吸光度的测定, 其标准曲线如下(仅供参考):

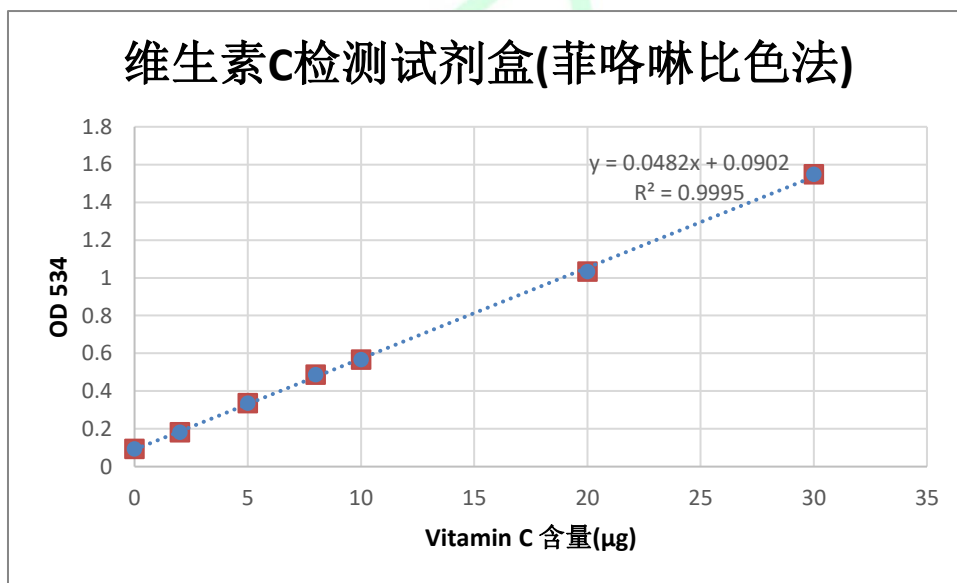

注意: 由于检测仪器和操作手法等条件的不同, 标准曲线会有差异, 该值仅供参考, 根据测定经验显示 Vc 标准在 0.5μg 以下, 35μg 以上, 标准曲线会有偏差。